




SILHOUETTE SOFT®

CONNECT THE DOTS, RECONNECT YOUR LIFE.

**SUTURA REABSORBIBLE CON CONOS
BIDIRECCIONALES**




LA TECNOLOGÍA DE CONOS

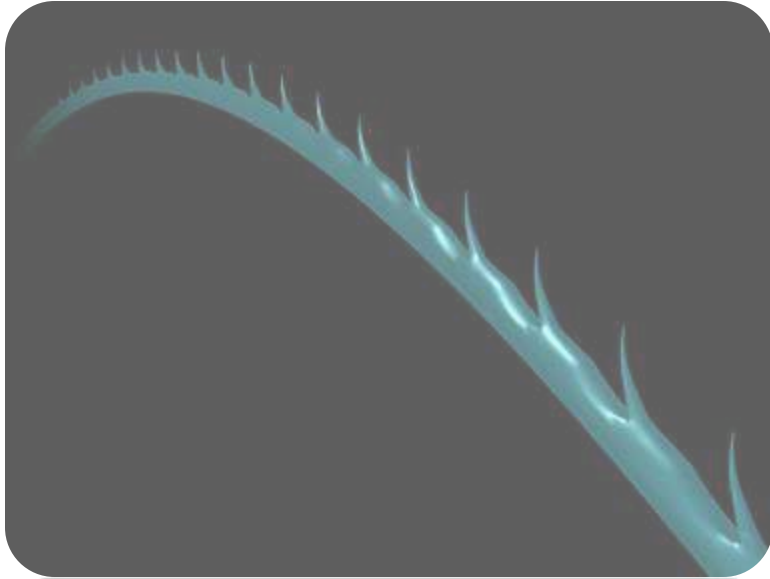

Desde las suturas con púas...


Érase una vez...

...hasta las suturas Silhouette

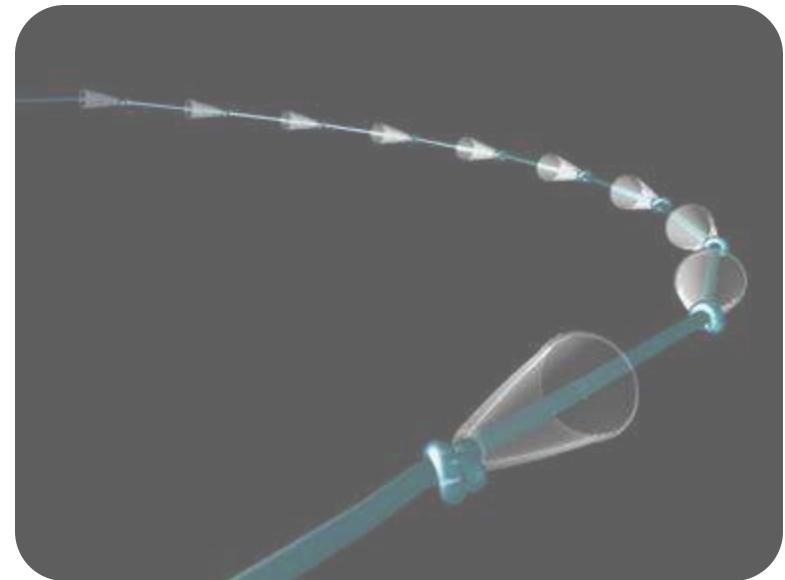

- Conos absorbibles
- Superficie de 360° para resistir la tracción por suspensión => fijación sólida en el tejido subcutáneo.
- La inducción de colágeno alrededor de los conos crea un soporte sólido en las partes blandas



=> Sin migración ni extrusión.

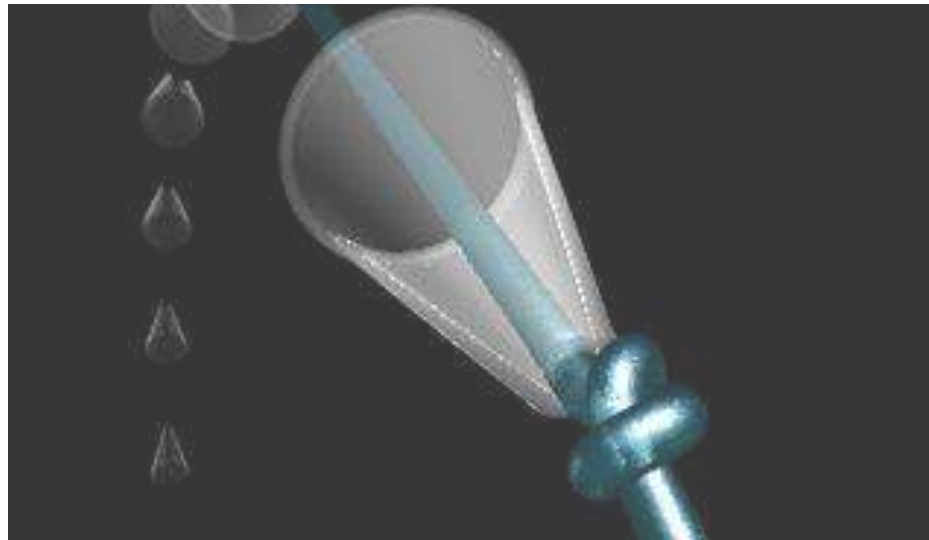

8 AÑOS DE SILHOUETTE LIFT Y 2 AÑOS DE SILHOUETTE SOFT...


SILHOUETTE SOFT®


SILHOUETTE LIFT®

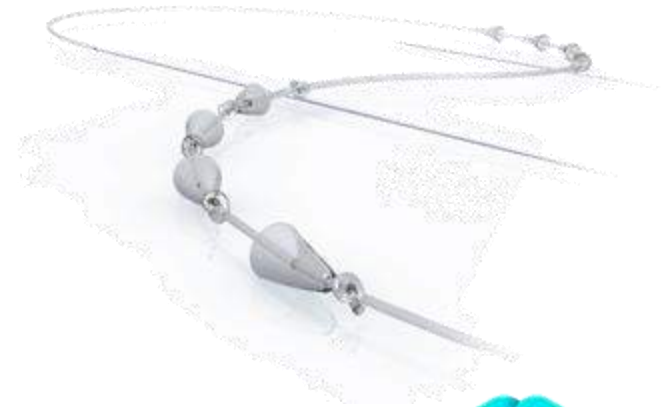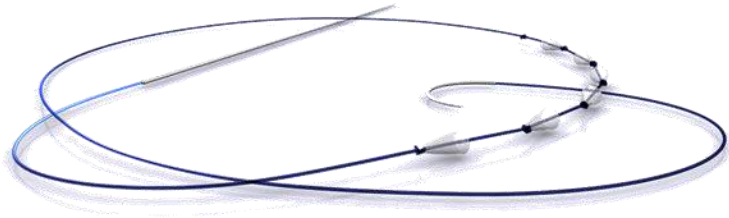



SILHOUETTE SOFT®
CONNECT THE DOTS, RECONNECT YOUR LIFE.

- ❑ Hasta ahora se han realizado más de 80.000 tratamientos con Silhouette Soft en 73 países
- ❑ Hasta la fecha se han realizado más de 60.000 tratamientos con Silhouette Lift en los campos estético y reconstructor
- ❑ Incidencia de complicaciones muy baja



ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

- ❑ Sutura bidireccional
- ❑ 4, 6 u 8 conos en cada mitad
- ❑ Totalmente reabsorbible
- ❑ No hace falta cirugía
- ❑ Tratamiento con anestesia local

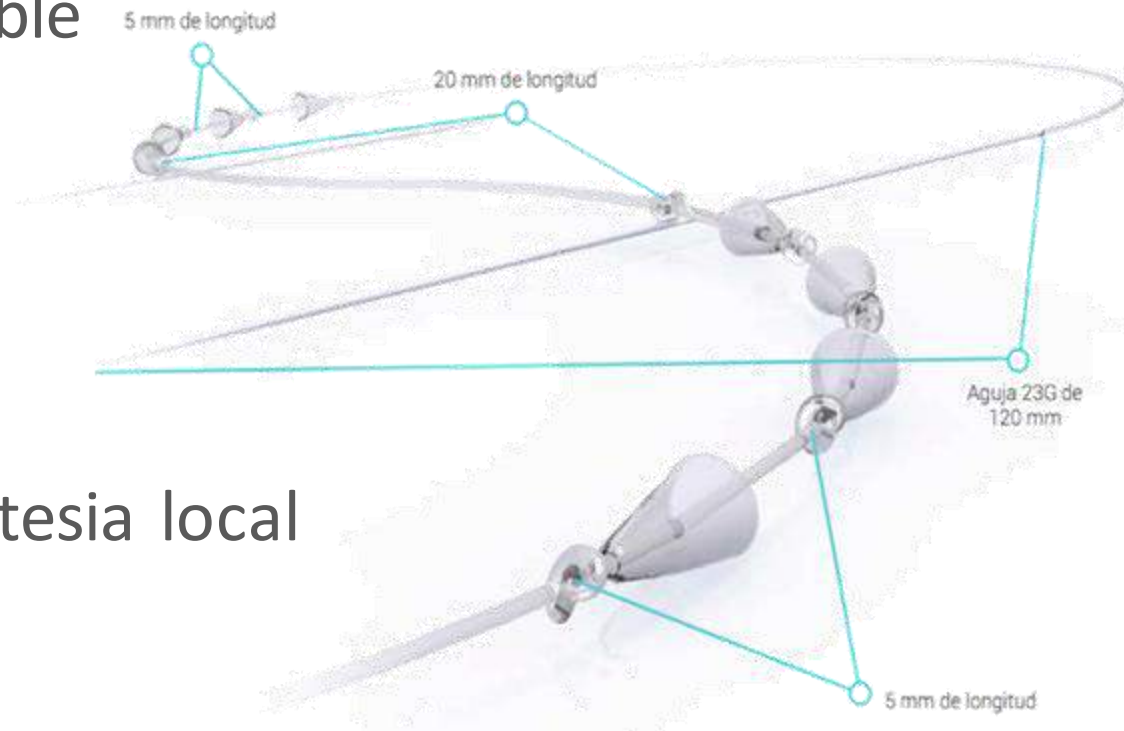

- ❑ Suturas de ácido poliláctico (PLA) 100%
- ❑ Conos de ácido poliláctico (82%) y polímero glicólico (18%)
- ❑ Cumple los requisitos de la USP
- ❑ El PLA se utiliza en dispositivos médicos e implantes desde hace décadas
- ❑ La velocidad de degradación del PLA es mucho menor que la de otros materiales que se utilizan frecuentemente para la fabricación de suturas, y en consecuencia sus beneficios son mucho más duraderos.

GAMA DE PRODUCTOS


PRODUCTO	SOFT 8 CONOS	SOFT 12 CONOS	SOFT 16 CONOS
CATEGORÍA USP	3.0		
LONGITUD	30 cm	27,5 cm	26,8 cm
NÚMERO DE CONOS	8	12	16
DIRECCIÓN DE LOS CONOS	Bidireccional		
ESPACIO ENTRE CONOS	5 mm	8 mm	8 mm
MATERIAL	PLA		
AGUJA	2 agujas (calibre 23) de 12 cm cada una		



LA TÉCNICA

PASO 1

MARCADO PREOPERATORIO – PATRÓN

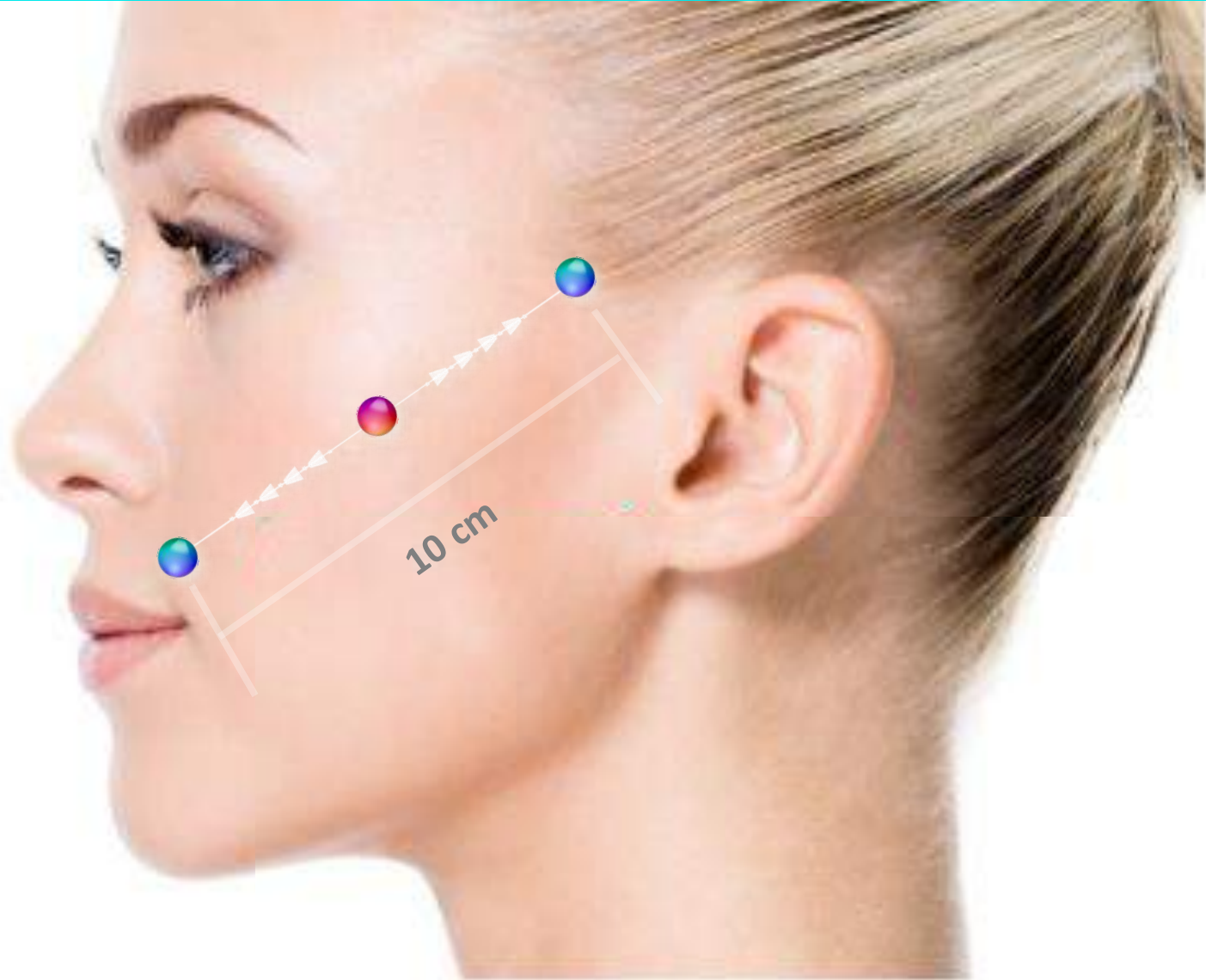








LA TÉCNICA

PASO 2



*Dependiendo del tamaño de la sutura



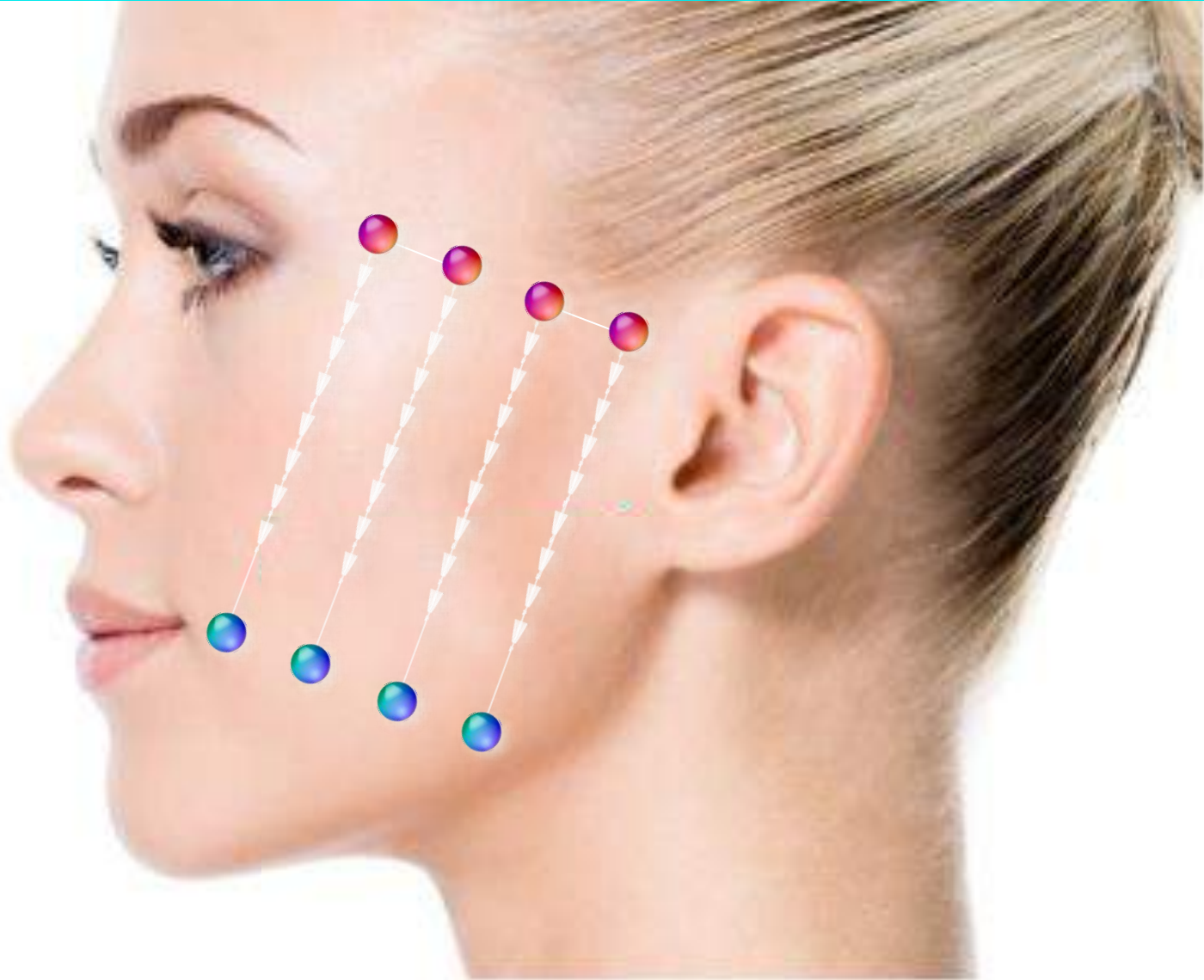



LA TÉCNICA

PASO 3









MI EXPERIENCIA
PERSONAL

MI EXPERIENCIA PERSONAL

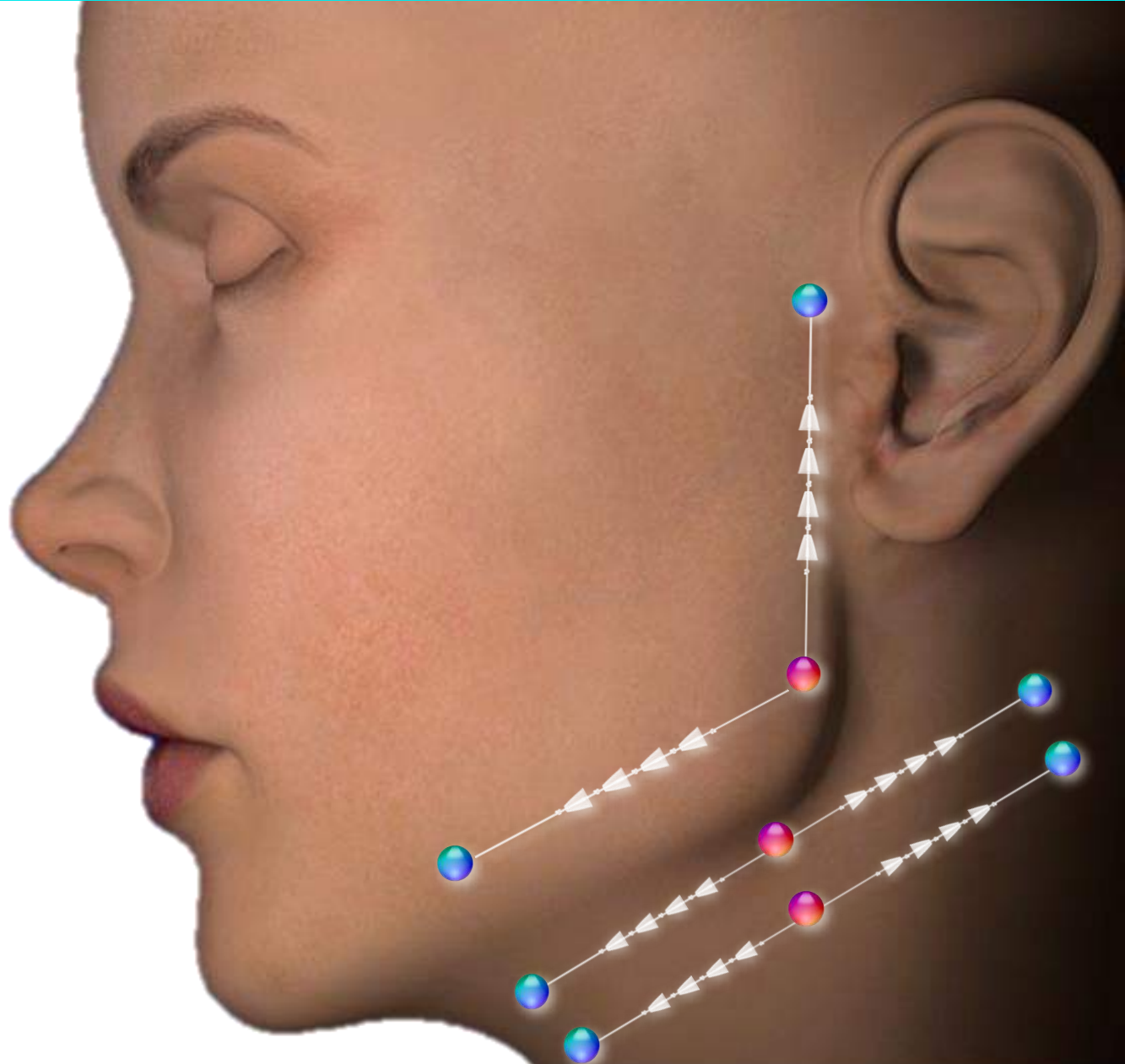


MI EXPERIENCIA PERSONAL

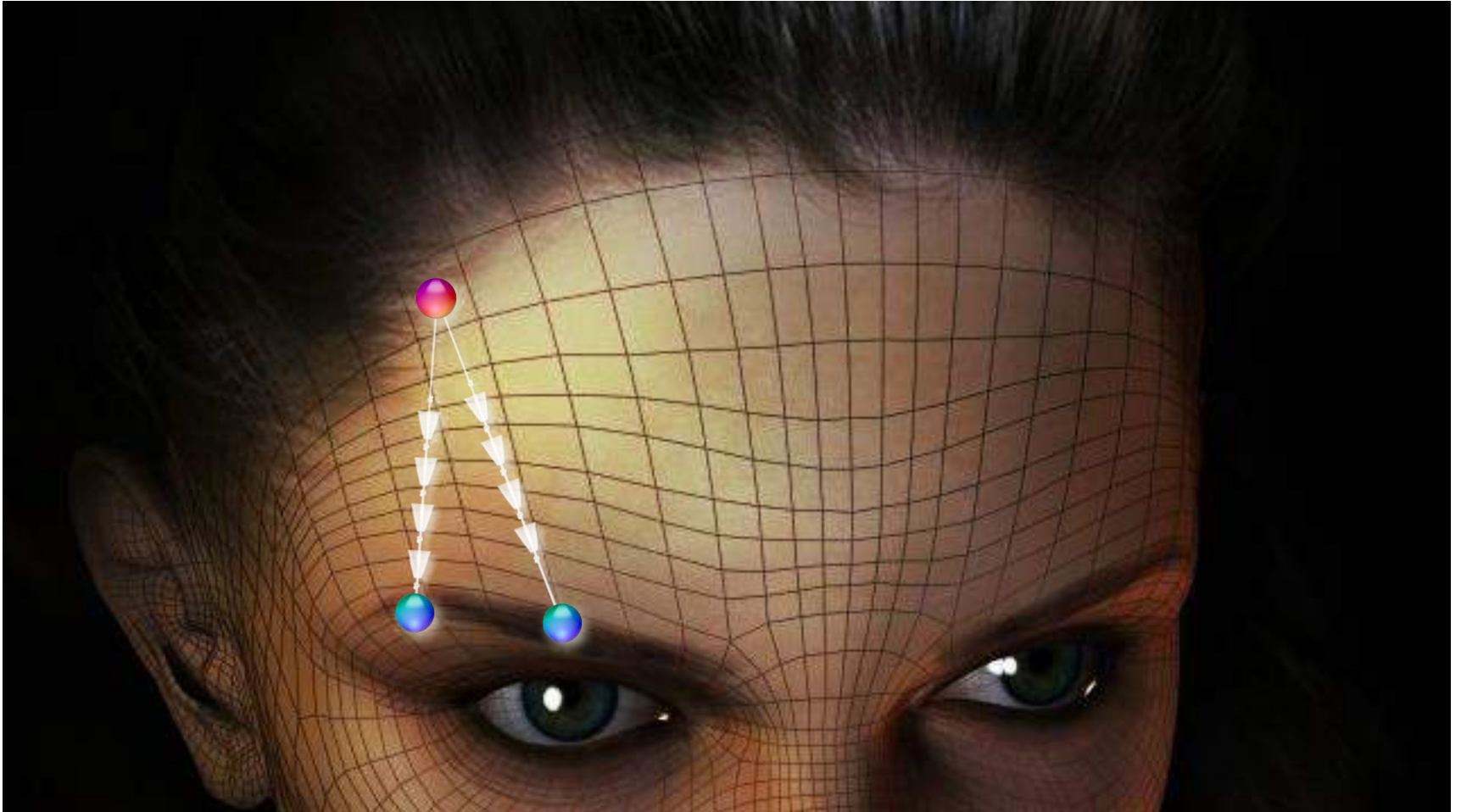


Actualmente uso no incluido en la ficha técnica, pendiente de la aprobación de las autoridades

MI EXPERIENCIA PERSONAL

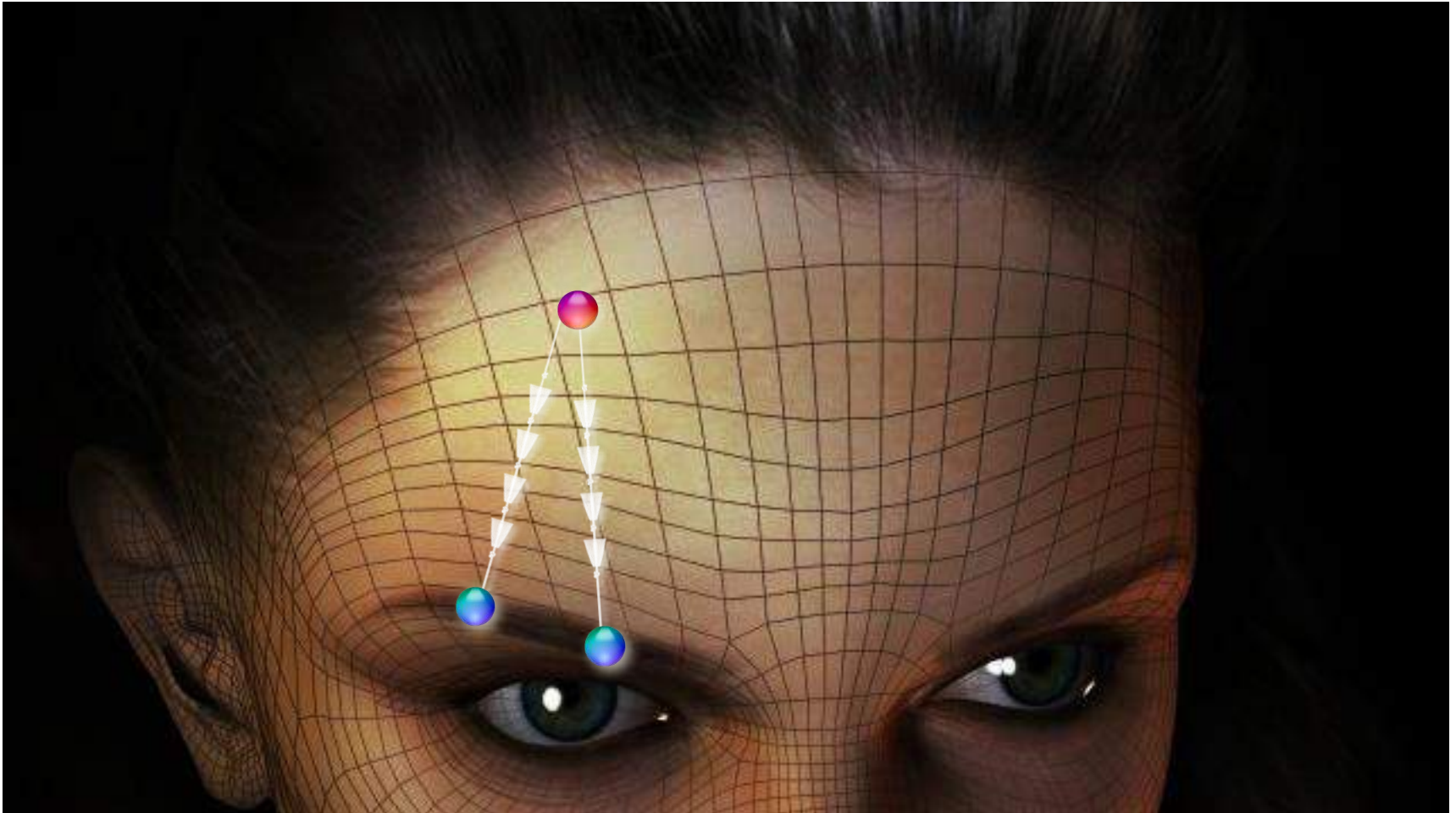

Actualmente uso no incluido en la ficha técnica, pendiente de la aprobación de las autoridades

MI EXPERIENCIA PERSONAL

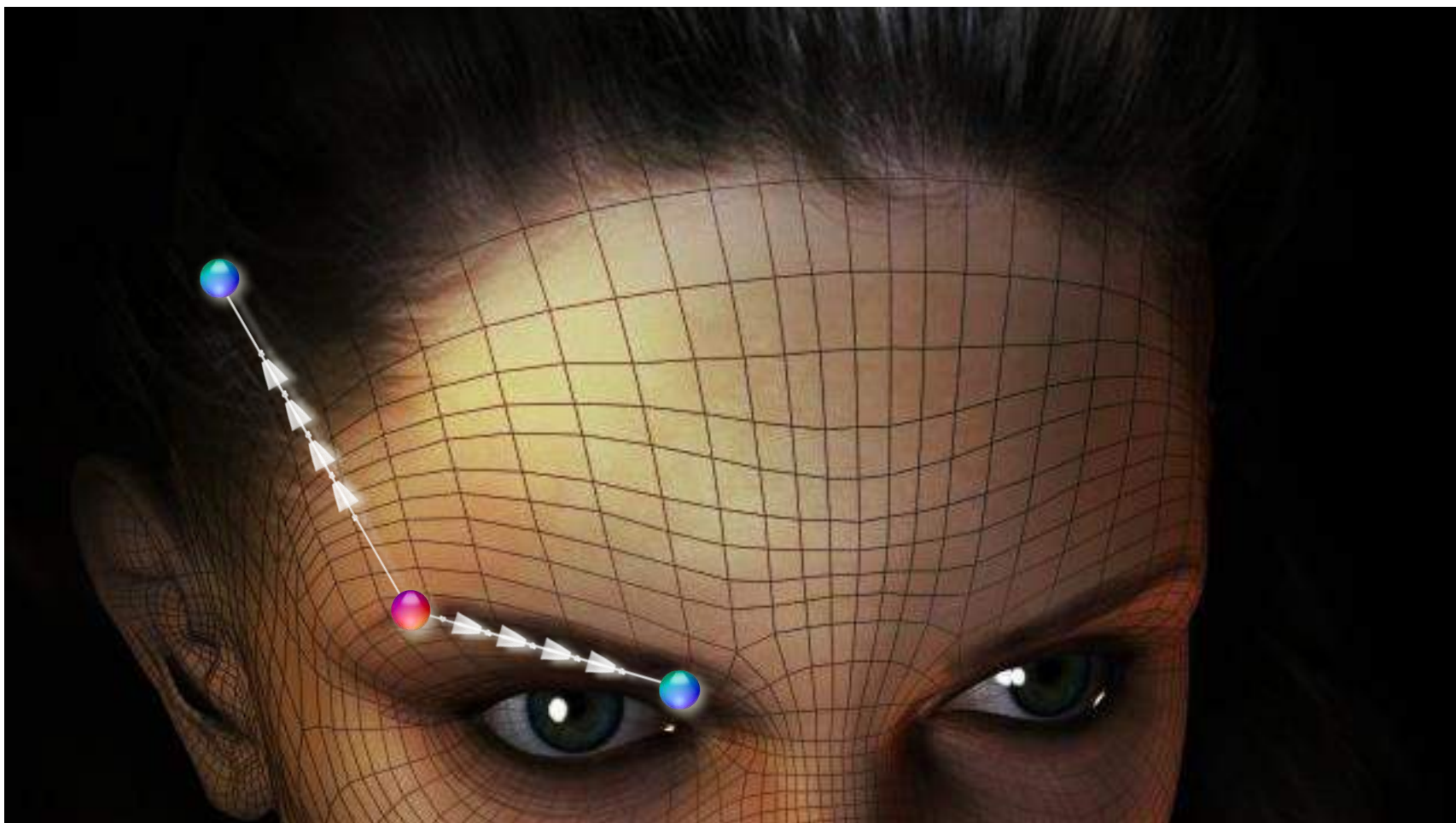

Actualmente uso no incluido en la ficha técnica, pendiente de la aprobación de las autoridades

PUNTOS CLAVE:

- Con cualquier marcado preoperatorio en cualquier zona, la anestesia y la técnica de inserción siempre serán las mismas
- La desinfección (3 veces) y la esterilidad son fundamentales.





ANESTESIA LOCAL



Lidocaína al 1% con adrenalina 1:200.000 - 0,5 cm³ en cada punto



LA TÉCNICA


PUNTO DE ENTRADA CON UNA AGUJA

COLOCAR AQUÍ:
[1.18Gneedle.wmv](#)


PUNTO DE ENTRADA CON UNA AGUJA DE CALIBRE 18 PARA LA TÉCNICA EN U




Utilización de la aguja de inserción de calibre 18 como trócar para la técnica en U

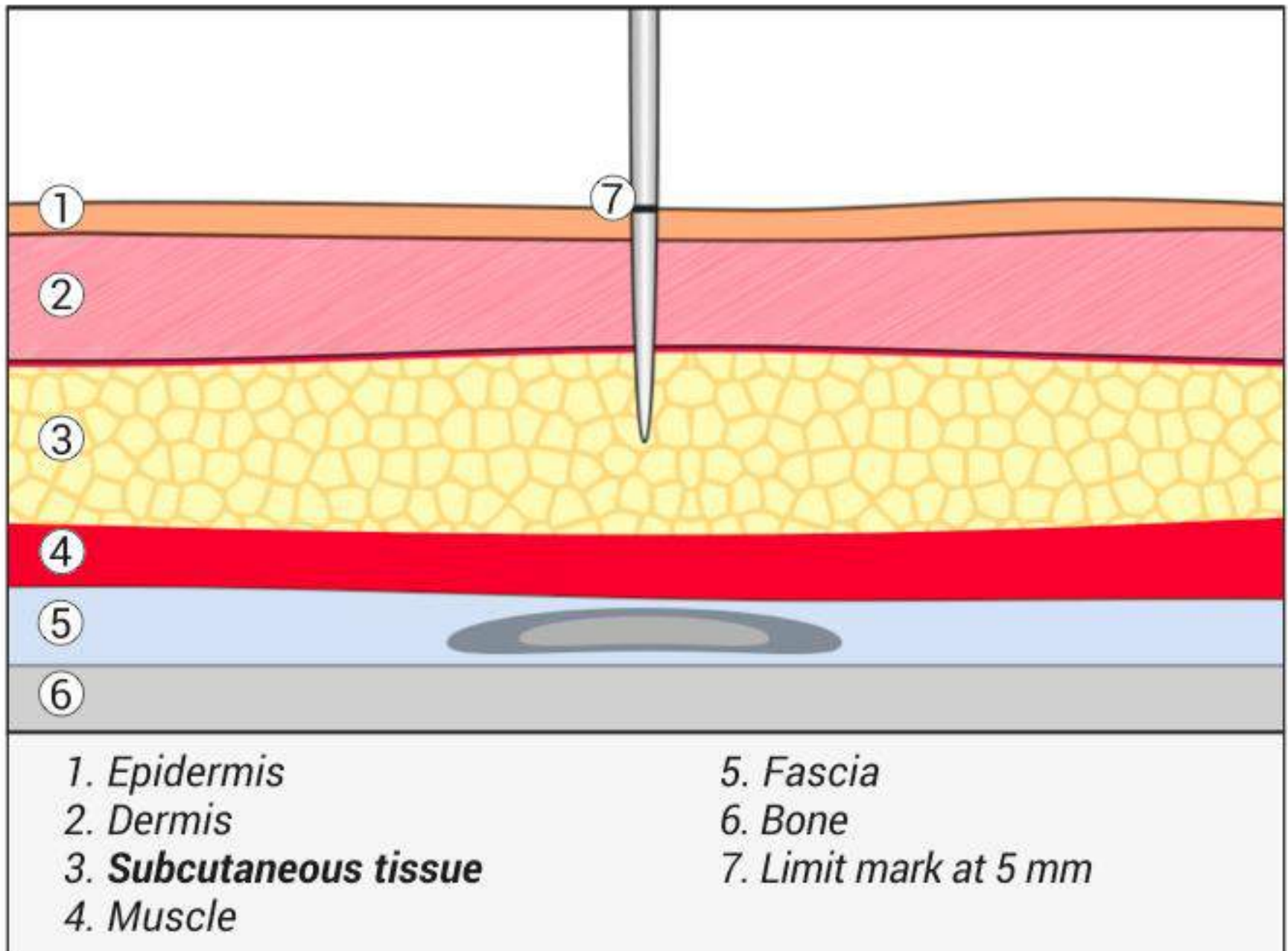

En la piel asiática puede ser necesario avanzar más profundo, porque la piel del área mandibular, por ejemplo, tiene 5 mm de grosor, frente a 2,8 mm de media en personas caucásicas

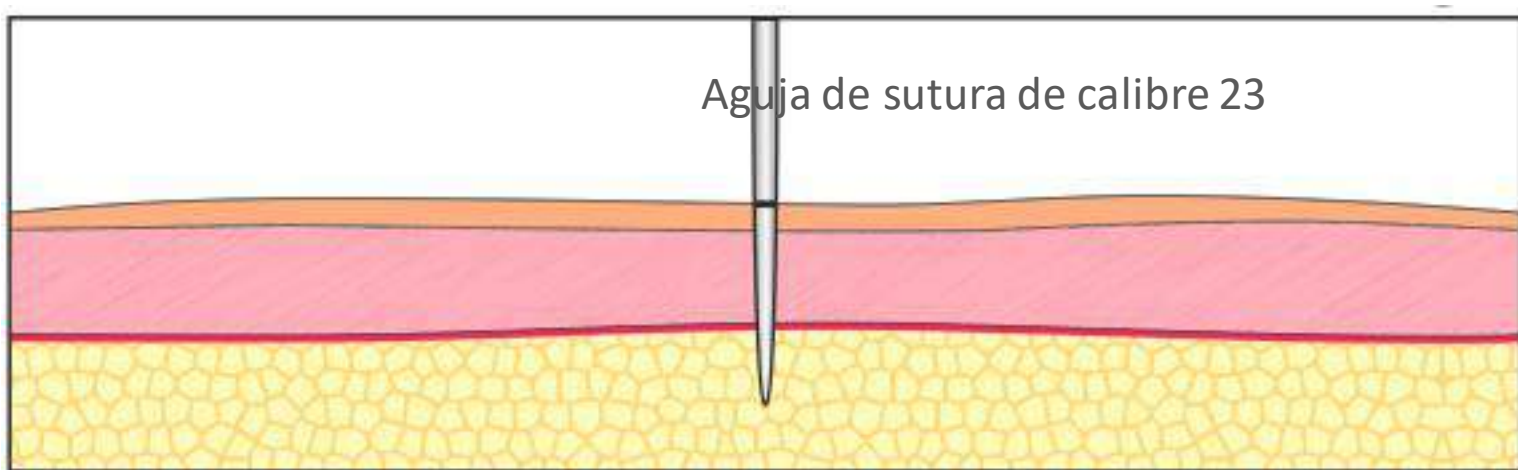



Punta de la aguja 5 mm en el tejido en posición VERTICAL.

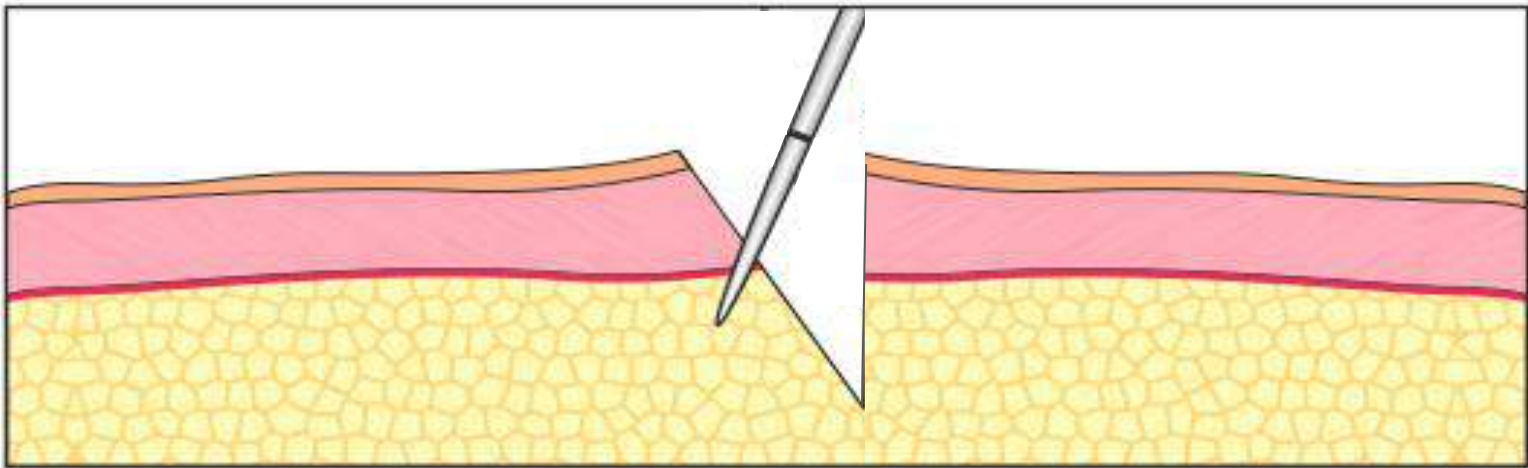

Inserción de la aguja en la primera mitad del patrón de sutura


INSERCIÓN DE LA SUTURA

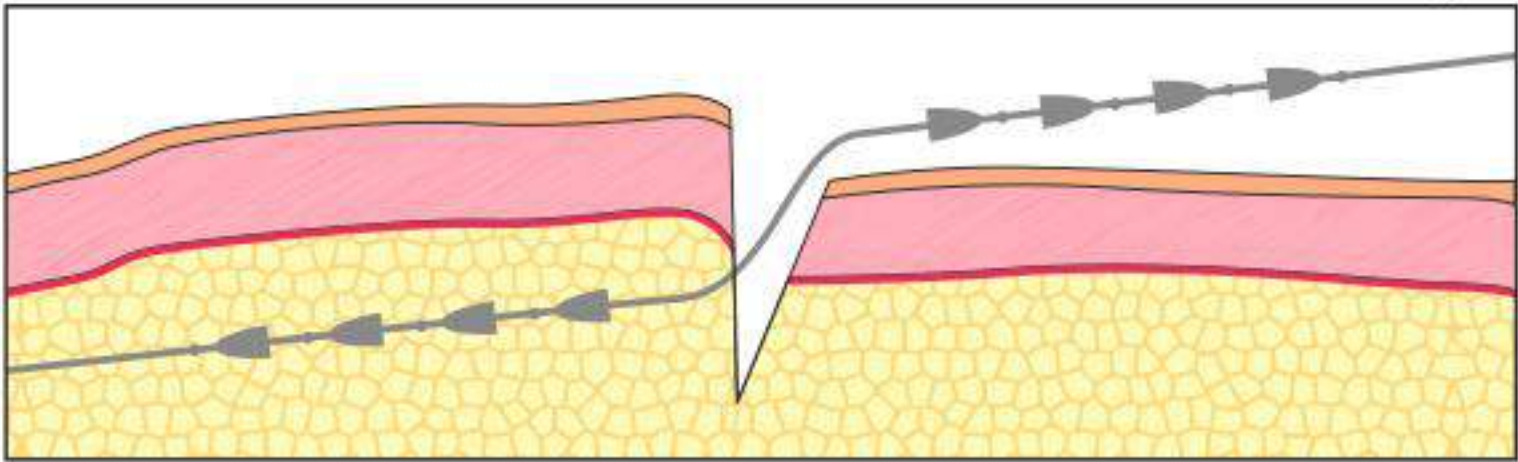


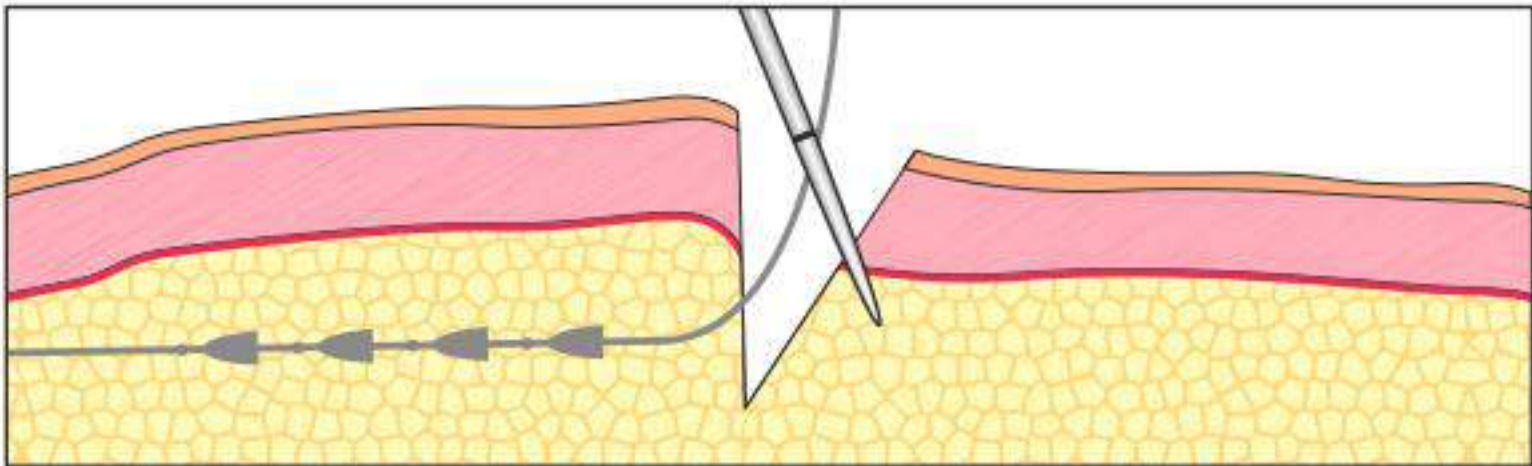

Inserción de la aguja en la segunda mitad del patrón de sutura


INSERCIÓN DE LA SUTURA

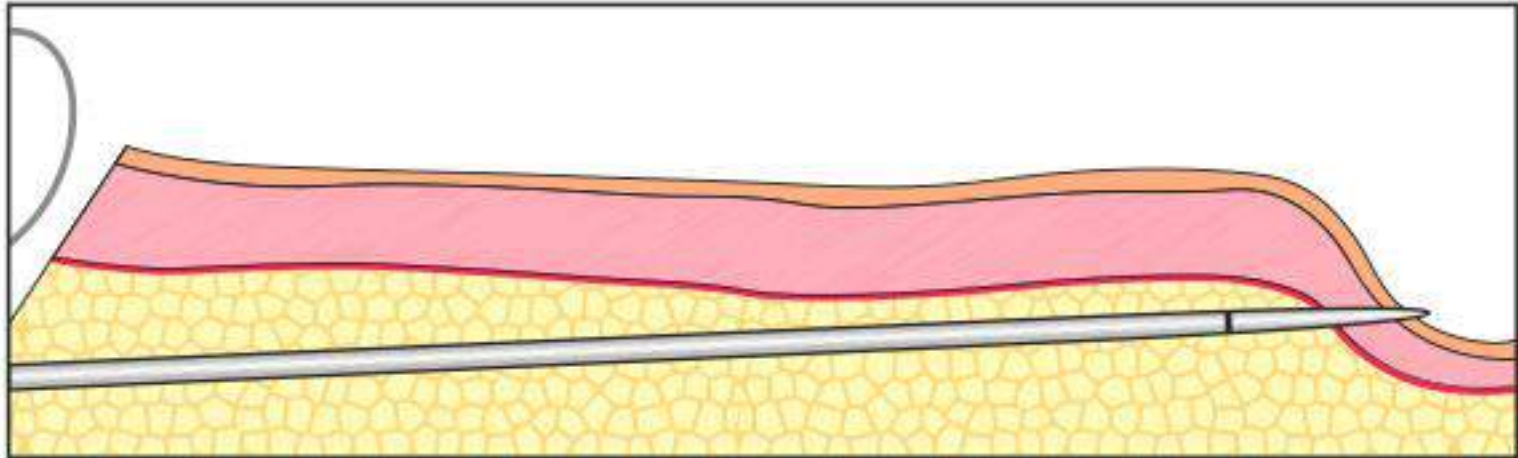

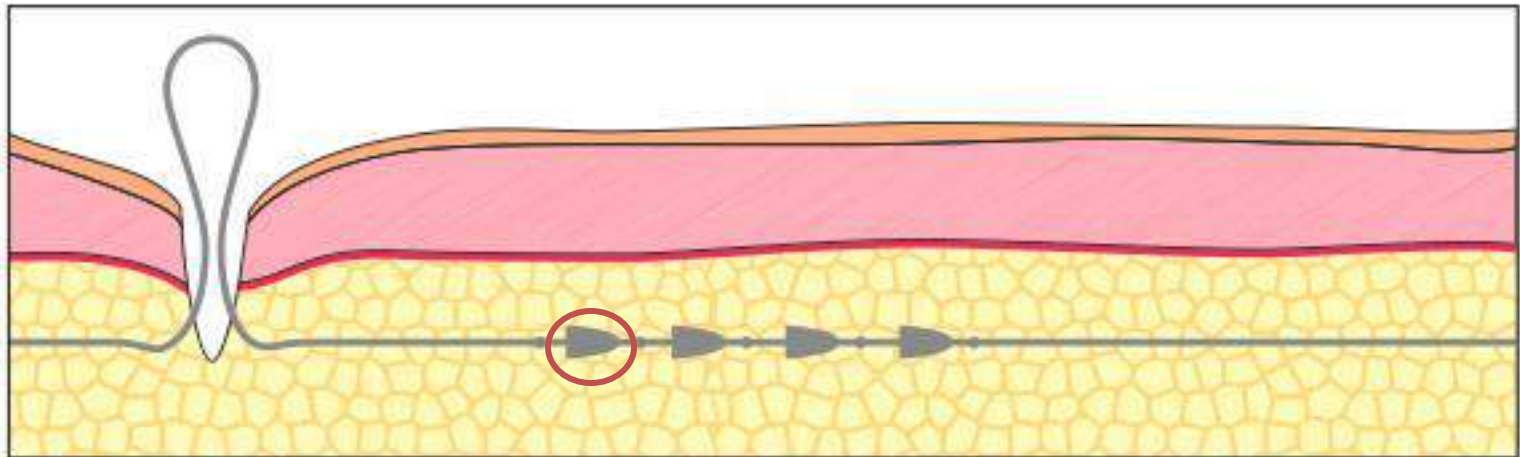


Si el último cono está en posición horizontal antes de entrar, eleve ligeramente la sutura con una punta de aguja para colocarla en posición vertical a fin de poder insertarla con mayor facilidad.


INSERCIÓN DE LA SUTURA

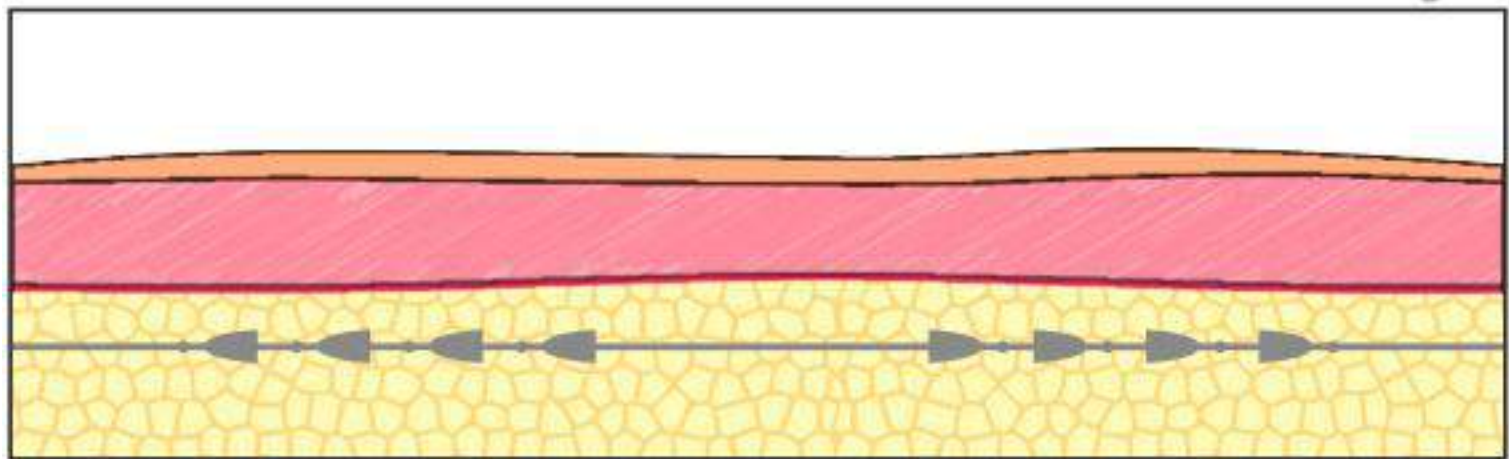

← TRACCIÓN →

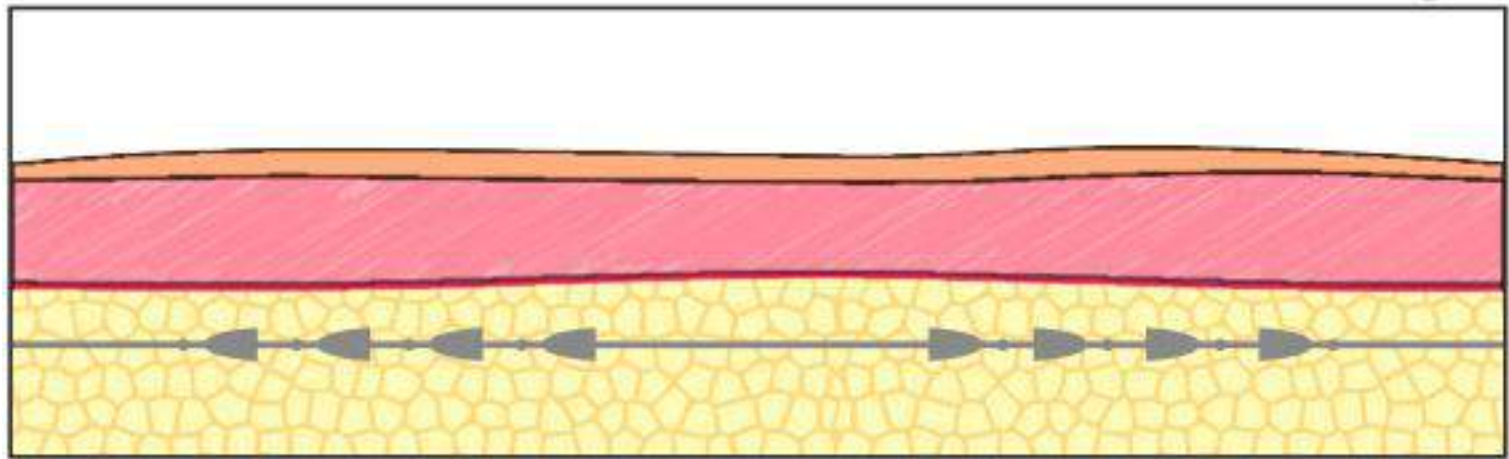

Sutura dentro del tejido

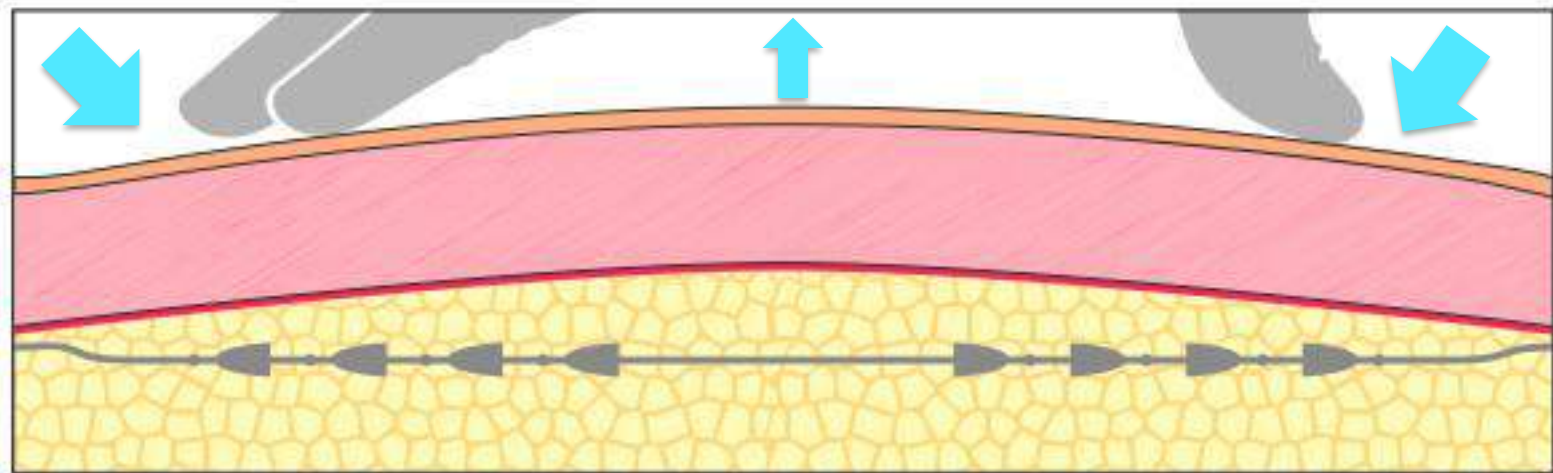

«Compresión» del tejido graso

Sin elevación excesiva: eleve hasta que obtenga el efecto de trenzado deseado

COLOCAR AQUÍ:
2.Insertion.wmv



INDICACIONES

- Ptosis de la piel mediofacial
- Pérdida de volumen malar
- Ptosis de la línea mandibular



Evaluación del efecto
elevando el tejido con los
dedos

○ CASOS

RESULTADOS CON SILHOUETTE SOFT®


SILHOUETTE SOFT®



Antes

Después



Antes



Después



Antes



Después

RESULTADOS CON SILHOUETTE SOFT®


SILHOUETTE SOFT®



Antes

Después



Antes



Después de 15
días



Antes



Después de 15
días



Antes



Después de 4
meses



Antes



Después de 4
meses



Antes



Después de 30
días



Antes



Después de 30
días



Y MÁS...

Recomendaciones: Las siluetas Silhouette Soft no se debe utilizar en caso de:

- Cualquier alergia conocida por sensibilidad de cuerpo extraño a biomateriales plásticos.
- Material de relleno permanente
- Enfermedades cutáneas agudas y crónicas
- Enfermedades autoinmunitarias
- Embarazo y lactancia
- Pacientes con septicemia o infección
- Pacientes con poca voluntad de restringir las actividades o seguir las instrucciones durante el período de cicatrización
- Pacientes menores de 18 años

- Rotura de la sutura
- Excavación transitoria en el punto de entrada
- Hematoma
- Pliegue cutáneo
- Edema, dureza, dolor

Todas ellas desaparecen
en pocos días.



GRACIAS POR SU
AMABLE ATENCIÓN

